



# MTW-01

Reliable endoscope washer & disinfecter



## Quick 소독 기능

Quick 소독으로 보다 간편하고 빠르게 내시경 소독이 가능합니다.



## 이중넘침방지 시스템

물과 소독제가 넘치는 것을 이중으로 방지하여 안전하게 사용할 수 있습니다.



## 공간 활용 용이

컴팩트한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용하기 편합니다.

## MTW-01 제품정보

내시경 수량	세척방법	화면표시방법	방수체크기능
1개	360° 회전분사	FnD	✓
소독제필터	소독제사용횟수기록	알코올&에어건	
✓	✓	Option	

## MTW-01 제품특징


- 
**소독 횟수 카운트**  
 사용자가 소독액을 몇 번이나 사용했는지 확인 가능하여 교환주기 판별에 용이
- 
**내시경용 컨넥터**  
 내시경 채널 내부 세척·소독용 컨넥터
- 
**최적화 챔버**  
 내시경기기 세척·소독에 최적화된 챔버
- 
**도어 센서**  
 기기 동작 중, 문이 열릴 시 기기 자동 멈춤 기능
- 
**단단하게 고정된 챔버 커버**  
 자석타입으로 되어 있어 잦은 사용에도 흘러내리지 않도록 고정되어 사용자의 편의성 향상



기본형

옵션형

## MTW-01 사용방법 및 순서

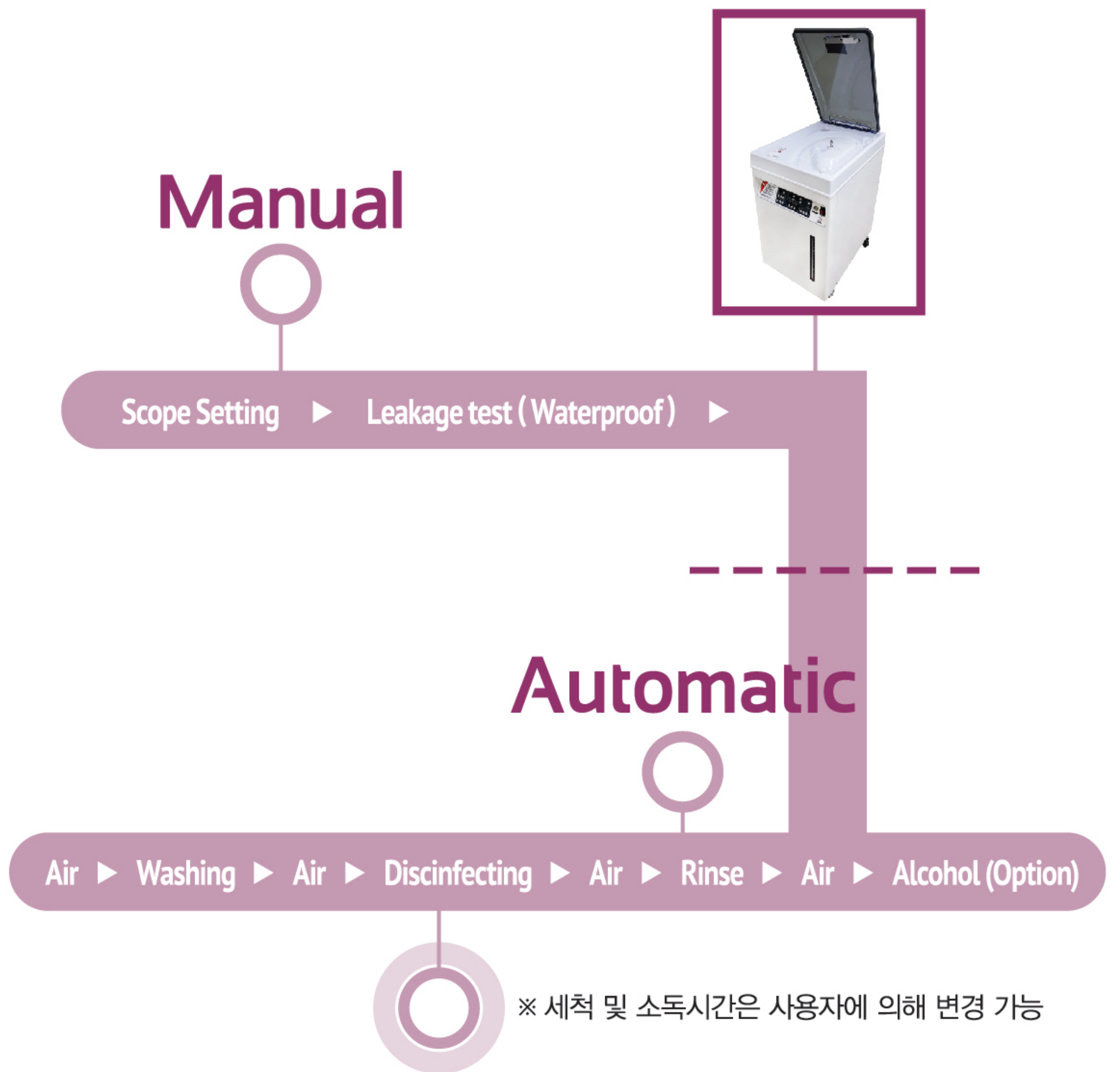

## Quick 소독



## MTW-01 제품사양

내시경 누수 테스터	내시경 방수체크
시간설정 (사용자 설정)	1) 세척시간 : 0 ~ 55초/60분 2) 소독시간 : 0 ~ 55초/60분 3) 린스시간 : 0 ~ 55초/60분 4) 알코올 : 0 ~ 60초 (옵션)
펌프	누수 체크 펌프, 에어 펌프, 배수 펌프, 소독액 펌프
챔버용량	약 8 L (소독액 탱크 : 9 L)
탱크용량	알코올 1L (옵션)
배출	소독액 잔량 배수호스 1개
전압/주파수	AC 220V, 60Hz
소비전력	350W
크기 (WxDxH)	518 x 730 x 975 mm (커버 닫힘) 518 x 730 x 1510 mm (커버 열림)
중량	58kg